


DAGBOK UNDER HOLTER-REGISTRERING VID SYMTOM			
Klistermärke med namn			Påbörjas, datum Avslutas, datum
Vilken i ordningen är tryckningen	Datum	Kl.	Orsaken till tryckningen (känslan). I en hurudan situation kom symtomet.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

23

ANVISNINGAR FÖR REGISTRERING MED ZENICOR-APPARAT

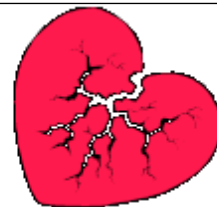

Inledning

- Tryck på **START**-knappen och vänta tills du ser texten **Klar för mätning** på skärmen.

Mätning

- Inled mätningen av EKG genom att lägga tummarna på elektroderna.
- Under mätningen ser du en lägesrapport på skärmen. Den berättar hur mycket mätningstid som ännu är kvar.
- När mätningen är klar, hör du en ljudsignal och det står **Mätning klar** på skärmen.

Att sända uppgifterna

- Sänd EKG-uppgifterna genom att trycka på **SÄND**-knappen.
- När uppgifterna håller på att sändas, ser du en lägesrapport på skärmen.
- När mätningen är klar, hör du en ljudsignal och det står **Sändning lyckades** på skärmen.
- Apparaten stängs av automatiskt

Under mätningen

- Det är viktigt att du håller tummarna på elektroderna under hela mätningen.
- Håll tummarna i en viloställning under mätningen och tryck dem stadigt mot elektroderna.
- Om du har symtom under mätningen, tryck på symtom-knappen så att polikliniken får veta om symtomet
- Om mätningen inte börjar inom 3-5 sekunder från att tummarna placerats på elektroderna, fukta tummarna lite och försök på nytt.
- Du kan förbereda apparaten för en ny mätning när som helst genom att trycka på **START**-knappen.
- Du kan avbryta en pågående mätning genom att trycka på **START**-knappen.

När du sänder uppgifterna

- När uppgifterna från EKG-registreringen sänds kan det komma följande slags texter upp på skärmen:

-

Fel	Instruktion
Ingen förbindelse till mobilnätet	Försök sända från ett annat ställe
Ingen förbindelse till EKG-databasen	Försök på nytt om en timme. Om det tar mer än 24 timmar, kontakta polikliniken.
Fel vid sändning	Kontakta polikliniken

Apparaten har inte registrerats	
Överföring av information misslyckades	Försök på nytt om en timme. Om det tar mer än 24 timmar, kontakta polikliniken.

- Om det uppstår ett fel när du sänder uppgifter, lagras EKG-registreringen i apparaten och den kan sändas senare.
- En EKG-registrering som lagrats kan sändas genom att man startar om apparaten och trycker på **sänd**-knappen.